



www.homecure.co.il

Дорогие пациенты!

Отделение медицинского обслуживания на дому "Типуль бэйти" НЕОФАРМ ИСРАЭЛЬ предоставляет инновационную систему медицинского обслуживания на дому, основанную на современных технологиях и в партнёрстве с высококвалифицированным медицинским персоналом. Медицинское обслуживание может быть предоставлено в привычной обстановке для пациента-у него дома.

Наши совместные усилия позволяют пациенту и его семье чувствовать себя спокойно и уверенно-у себя дома. Услуги предоставляются пациентам всех больниц, всех больничных касс на территории Государства Израиль.

Просим связаться с:

Фамилия и имя лечащей медсестры:

Телефон для вопросов \ получения информации:

Технический редактор:

Сара Бен-Ами,
Ассоциация по распространению услуг онкологического
медперсонала в Израиле

Распространяется с любезного согласия
Home Cure™ – Отдел домашнего лечения концерна
"Неофарм"

1-800-30-68-68

НЕОФАРМ
Отдел домашнего лечения
Внутривенные вливания
Home Cure™



Ассоциация по распространению услуг онкологического медперсонала в Израиле

РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФУЗИОННЫМ НАГНЕТАТЕЛЕМ РАСТВОРОВ (ИНФУЗОРОМ)



Нашы пациенты в надёжных руках

Замкнутая система гарантирует
полную безопасность

Уважаемый пациент \ уважаемая пациентка!
Информация, предоставленная Вам в этой брошюре, предназначена для того, чтобы помочь Вам понять, как пользоваться домашним инфузором. Процедура осуществляется насосом инфузора, подсоединенным к центральному катетеру – **ПОРТ-А-КАТ** или **ХИКМАН**.


Приведенные в настоящем руководстве указания не предназначены заменить профессиональную врачебную консультацию.

Что такое инфузор?

Насос-инфузор – это механический насос, обеспечивающий постоянную скорость вливания в течение длительного периода времени. Он включает в себя баллончик с содержащимся в нем лекарственным препаратом в предписанных Вашим врачом дозировке и количестве. Далее идет трубочка, на которой установлены фильтр, затвор и датчик. Датчик следует с помощью липкого пластыря прикрепить к телу.

Инфузор поставляется вместе с трубочкой, содержащей промывочную жидкость, предохраняющую от контакта с находящимся в резервуаре лекарством.

На каждом инфузоре имеется маркировочный ярлык, где указаны данные пациента, название лекарства, дозировка и дата окончания срока годности.

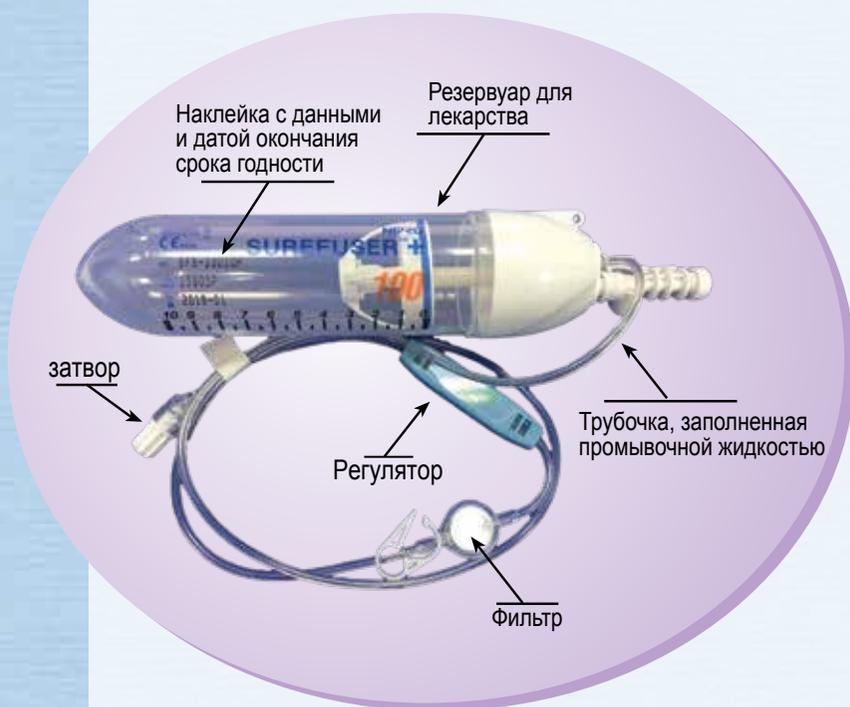

Можно ли купаться с инфузором?

Да. Следует вытащить **инфузор** из чехол для переноски (пауч) и завернуть его в полиэтиленовый пакет для предотвращения контакта с водой.

Завернутый **инфузор** можно повесить повыше в душевой кабинке.

Следует стараться избегать контакта с водой в месте повязки на катетере и всей инфузионной системы.

Купание в море или в бассейне запрещается!

Смена повязки на катетере

Повязку катетера следует менять один раз в 48 часов или когда она намокнет, сдвинется с места или наполнится выделениями

В каких случаях обращаться к медицинскому персоналу?

Наличие болей, повышенной чувствительности, красноты или отечности в области катетера:

Следует немедленно прекратить введение препарата, переключив оба запирающих устройства, и обратиться к лечащему персоналу.

Сыпь, появление жара (высокой температуры) или озноба:

Следует прекратить введение препарата, переключив оба затвора, и обратиться к лечащему персоналу.

Инфузор не действует \ баллончик не опустошается:

Скорость вливания жидкости очень невысока и потому может пройти весьма длительный период, пока изменения в объеме баллончика станут заметны (6 – 10 часов).

Если в течение длительного времени не заметно никаких изменений в количестве жидкости, возможно, что-то блокирует работу инфузора.

Следует проверить катетер и убедиться, что нет пережатия трубочек и что оба затвора открыты.

Если причина неисправности не обнаружена, следует обратиться к лечащему персоналу.

Если инфузор отсоединился от катетера или произошло отсоединение в другом месте инфузионной системы - следует закрыть все затворы во избежании утечки лекарства.



Уход за катетером по окончании процедуры:

По окончании каждого курса лечения, когда катетером не пользуются, его следует промывать в больнице или поликлинике больничной кассы.

Для катетера типа **ПОРТ-А-КАТ** – промывать 1 раз в 4 – 6 недель в больнице или поликлинике больничной кассы.

Для катетера типа **ХИКМАН** – промывать 1 раз в неделю в больнице или поликлинике больничной кассы.