

תדריך לטיפול באינפיוזר



המטופל בידיים טובות

בטיחות מלאה
באמצעות מערכת סגורה

מטופלות יקרה,
חטיבת הטיפול הביתי טיפול ביתי - ניאופרם ישראל, מובילה תפיסת שירות חדשנית לפיה על בסיס טכנולוגיה חדשנית ועכשווית, שותפות עם עמיתים ומיומנויות סעודיות ורפואיות גבוהות - ניתן להנגיש את הטיפול הרפואי לסביבתו הטבעית והתומכת של המטופל בבית.
העשייה המשותפת שלנו, מאפשרת לך ולמשפחתך, להרגיש בטוח בבית!

השירות ניתן
לכל בתי החולים וקופות החולים, בפריסה ארצית

שם האחות המטפלת:

טלפון לשאלות/בירורים:

עריכה מקצועית:
שרה בן עמי ונורית יאיר,
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל.

הופק באדיבות:


טיפול ביתי
החברת ניאופרם בישראל

ניאופרם ישראל
קבוצת ניאופרם
1-800-30-68-68

חבישת הצנתר

חבישה אטומה/ שקופה - יש להחליף אחת לשבוע
חבישת גזה - יש להחליף אחת ל-48 שעות.
יש להחליף את החבישה בכל מקרה בו היא רטובה,
מתקלפת או עם הפרשות.

באילו מקרים יש לפנות לצוות המטפל?


כאב או נפיחות באזור הצנתר - יש להפסיק מיד
את מתן התרופה על ידי סגירת שני הסגרים
פריחה, הופעת חום או צמרמורת - יש להפסיק את
מתן התרופה על ידי סגירת שני הסגרים

האינפיוזר אינו מטפטף או הבלון לא מתרוקן
- לרוב ניתן יהיה להבחין בשינוי נפחו של הבלון רק
לאחר כ-10-6 שעות.

במקרה ואין שינוי בכמות החומר לאורך זמן יש לבדוק
את הצנתר ולודא ששני הסגרים פתוחים ושאינן קיפול
של הצינוריות.

במידה ולא ניתן לאתר את הבעיה יש לפנות לצוות
המטפל

המשאבה התנתקה מהצנתר - יש לסגור הן את
סגרי הצנתר והן את סגרי האינפיוזר למניעת דלף.

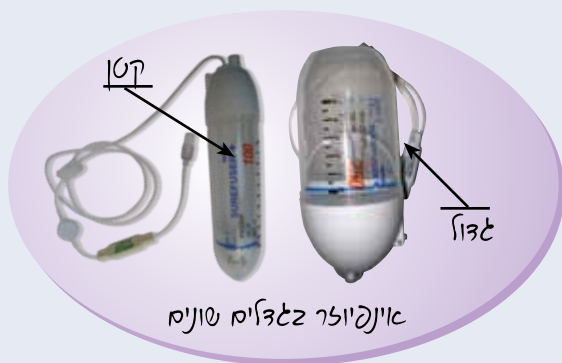

תחזוקת הצנתר לאחר תום הטיפול:

בסיום כל טיפול וכשהצנתר אינו בשימוש יש לשטוף את
הצנתר במסגרת בית החולים או קופת החולים.

צנתר מסוג **פורט-א-קאט** יש לשטוף אחת ל-4-6
שבועות.


צנתר מסוג **היקמן / פיקליין** - יש לשטוף אחת ל-7 ימים.

מטופלת/ יקר/ה,

המידע המובא לך בחוברת זו בא לסייע בהבנת השימוש
באינפיוזר בבית. הטיפול מתבצע בעזרת משאבת האינפיוזר
המתחברת לצנתר מרכזי - **פורט-א-קט** או **היקמן**.
הנחיות תדריך זה אינן באות להחליף ייעוץ רפואי מוסמך.

מהו אינפיוזר?

משאבת האינפיוזר הינה משאבה מכנית המאפשרת
קצב טיפוטף קבוע לאורך זמן. היא מכילה בלון בו נמצאת
התרופה לפי המינון והכמות שהרופא קבע. בהמשכה
ישנה צינורית שעליה מורכבים פילטר, סגר וחיישן. את
החיישן יש להצמיד לגוף בעזרת פלסטר.
האינפיוזר מגיע עם צינורית המכילה נוזל שטיפה, המגן
מחשיפה לתרופה הנמצאת במיכל.
כל **אינפיוזר** מסומן בתווית ועליה פרטי המטופל, שם
התרופה, מינון ותאריך תפוגה.

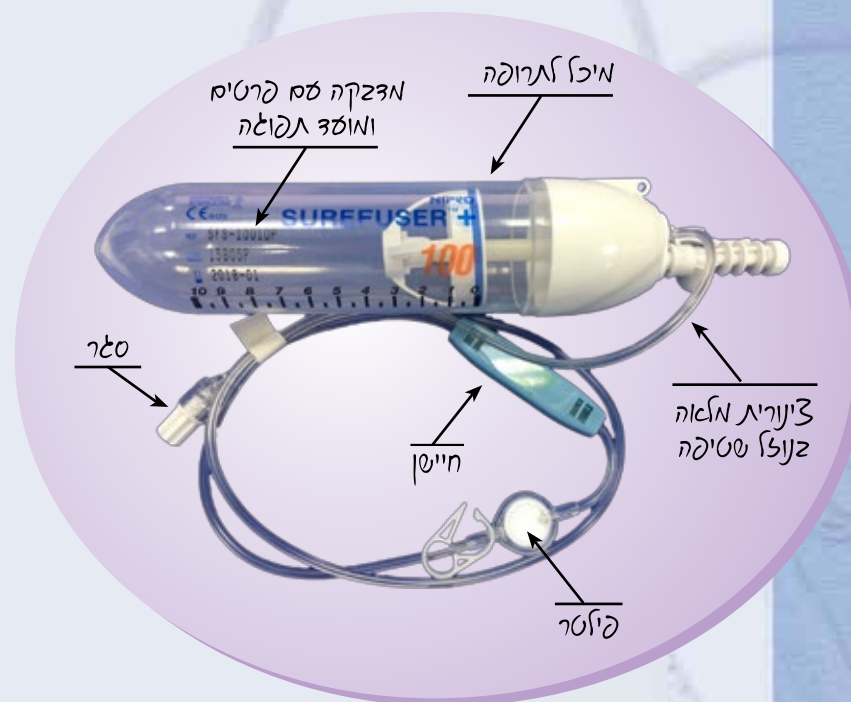

הנחיות למקלחת עם האינפיוזר

יש להוציא את האינפיוזר מתיק הנשיאה (פאופ'י) ולעוטפו
בשקית ניילון, כדי שלא יבוא במגע עם מים.

ניתן לתלות את האינפיוזר העטוף, במקום גבוה במקלחת.
יש להימנע מהרטבת החבישה ומערכת העירוי.

שחייה בים או בבריכה אסורה!